

# BEDIENUNGSANLEITUNG HAND- UND FUßPLATTE




## FÜR GENO62-SONIC

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Firma TORKINE entschieden haben. Oben genanntes Zubehör wurde speziell für die Verwendung mit dem Geno62-SONIC der Firma TORKINE entwickelt und *in Deutschland (Sachsen) hergestellt und handbemalt.*

Die Geno-SONIC-Geräte und das zugehörige Zubehör, wie das von Ihnen erworbene Produkt sind eine Produktion, welche vom Forschungszentrum Prof. Kempe GbR angeregt wurde.

### WARNHINWEISE:

Die Ultraschallpads der gelieferten Platte arbeiten mit einer geringen Stromstärke. Sollte sich in Ihrem Körper ein Implantat befinden, halten Sie vor der Nutzung bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Heilpraktiker.

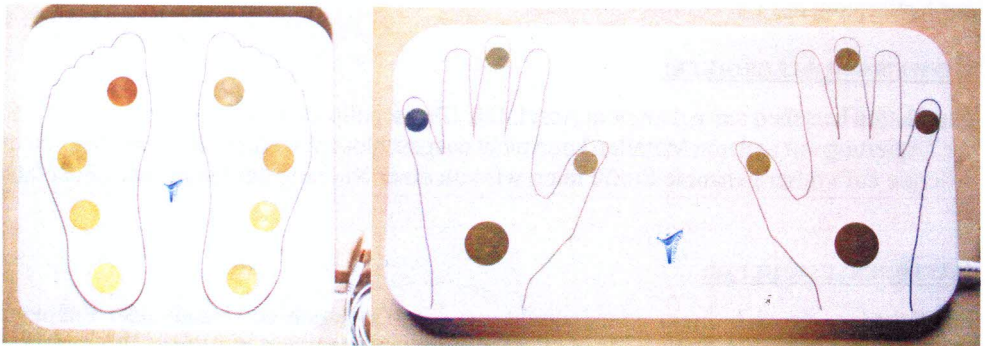

### BENUTZUNG DER HAND- BZW. FUßPLATTE:

Bei Nutzung der Hand- oder Fußplatte wird empfohlen, das Geno62-SONIC im Netzbetrieb, das heißt mit angeschlossenem Ladegerät zu betreiben. **Schließen Sie nie mehrere Hand- und/oder Fußplatten an ein Geno62-SONIC, dies kann zu einer Überbelastung des Geno62-SONIC führen, in diesem Fall entfällt jegliche Garantie!**

1. Schließen Sie die Platte an den Ultraschall-Eingang Ihres Geno62-SONIC statt der Ultraschallpads an. Sollten Sie gleichzeitig Hand- und Fußplatte verwenden wollen, nutzen Sie ein Y-Kabel. Dieses schließen Sie an den Ultraschalleingang Ihres Gerätes an und stecken Hand- und Fußplatte in die beiden Enden des Adapters.
2. Setzen Sie sich bequem auf einen Stuhl, Hände oder Füße sollten nicht überkreuzt sein. Positionieren Sie die Fußplatte zwischen Ihren Füßen, die Handplatte bequem auf Ihrem Schoß. Bitte Hände oder Füße noch nicht auflegen!

**Achtung:** Weder Hand- noch Fußplatte sollten mit Ihrem gesamten Körpergewicht belastet werden. - **Bei Nichtbeachtung entfällt der Garantieanspruch!**

3. Schalten Sie das Geno62-SONIC ein. Setzen Sie nun die Füße (ohne Strümpfe) auf die Fußplatte, richten Sie sich dabei nach der obersten Elektrode, auf dieser sollte Ihr großer Zeh stehen. ODER Legen Sie Ihre Hände auf die Handplatte, richten Sie sich dabei nach den Elektroden der Finger und legen dann den Handballen entsprechend ab.

4. Nun können Sie das gewählte Programm abspielen. Die Ultraschall-LED des Geno62-SONIC leuchtet auf, wenn korrekter Kontakt zur Platte besteht und das Programm läuft.

#### **PFLEGEHINWEISE:**

Nutzen Sie zur Pflege Ihrer Hand- oder Fußplatte ein weiches, nicht scheuerndes Tuch und ausschließlich milde Reinigungsmittel. Wir empfehlen die Reinigung der Pads mit Mellerud Polierpaste für Messing, anschließend die Platte mit Alkoholpads bzw. medizinischem Reinigungsfluid aus der Apotheke reinigen.

**Bitte vermeiden Sie** die Verwendung von Verdünnungen, Reinigungsbenzin, Nagellackentferner u.ä., da diese zu Verfärbungen der Platte, Schäden an den Pads sowie zur Entfernung des Lackes führen können.

#### **HINWEIS FÜR ALLERGIKER:**

Die Platten bestehen aus gehärtetem Acryl. Die Ultraschallpads sind aus Messing gefertigt, die Legierung mit anderen Metallen kann nicht ausgeschlossen werden. Bei einer bekannten Allergie auf vorher genannte Stoffe raten wir von einer Nutzung der Hand- bzw. Fußplatte ab.

#### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS:**

Für Schäden, die sich direkt oder indirekt aus dem Gebrauch der Hand- oder Fußplatte ergeben, sowie für mögliche beiläufige oder Folgeschäden kann die Firma TORKINE – Peggy Malyska und das Forschungszentrum Prof. Kempe GbR nur bei Vorliegen von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftbar gemacht werden.

**Bitte beachten Sie,** dass wir keinerlei Garantien für die Verwendung mit anderen Geräten als unserem Geno62-SONIC übernehmen können. Insbesondere für Schäden an Fremdgeräten übernehmen wir keine Haftung.

#### **GARANTIE:**

Für die Hand- bzw. Fußplatte besteht die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten. Unter diese Herstellergarantie fallen Mängel und Schäden, welche durch Material- oder Verarbeitungsfehler bedingt sind. Der Garantieanspruch entfällt bei nicht sachgemäßer oder missbräuchlicher Verwendung der Platte oder durch eigenmächtige Änderungen oder Reparaturversuche.